


TABLET GRZEWCZY **THERMOCARE** *Convenience*

- Tablet THERMOCARE *Convenience* to urządzenie grzewcze dedykowane noworodkom i niemowlakom, o masie ciała do 7,0 kg;
- Zapewnia komfortowe warunki cieplne małemu pacjentowi podczas badania lekarskiego, wykonywania czynności terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub pielęgnacyjnych;
- Ogrzewanie pacjenta następuje na zasadzie kondukcji (przewodzenie ciepła z wykorzystaniem żelowego materaca);
- Możliwość umieszczenia urządzenia na dowolnym blacie, bez konieczności dodatkowych instalacji;
- Tablet grzewczy THERMOCARE *Convenience* w połączeniu z promiennikiem ciepła z serii CERAMOTHERM tworzy zintegrowane miejsce opieki noworodka, co zapewnia warunki otoczenia równoważne mobilnemu aparatowi do resuscytacji.;
- Zakres regulacji temperatury w zakresie od 30⁰C do 38,5⁰C ustawiany z dokładnością do 0,1⁰ C;
- Ciągła praca urządzenia gwarantuje jego gotowość na wykorzystanie w dowolnym czasie;
- THERMOCARE *Convenience* może pracować samodzielnie, bez konieczności stosowania innych urządzeń grzewczych;
- Wydzielone miejsca na podstawie grzewczej umożliwiają umieszczenie niezbędnych do badania i pielęgnacji akcesoriów.

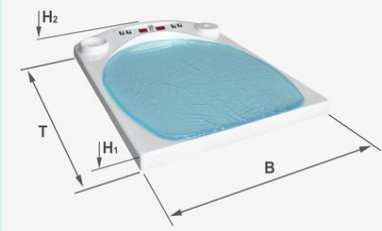

Parametry techniczne **THERMOCARE Convenience**:

Wymiary	T = 715mm, B = 600mm, H1 = 40mm, H2 = 100mm	
Waga	12 kg	
Zasilanie	~ 230 V / 50 Hz	
Max. moc wejściowa	160 W / 0,7 A	
Autotest	Tak	
Regulacja temperatury	Tak, w odstępach co 1°C	
Zakres standardowy	35°C do 37°C	
Zakres rozszerzony	Przedłużony zakres od 30°C do 38,5°C	
Cyfrowy wyświetlacz temperatury	Tak	
Cyfrowy rzeczywisty wskaźnik temperatury	Tak	
Cyfrowy wyświetlacz ciepła resztkowego (urządzenie wyłączone)	Tak, w aktualnym wyświetlaczu temperatury	
Alarm awarii systemu	Tak, wizualny i dźwiękowy	
Alarm dla odchylenia temperatury ± 1°C	Tak, wizualny i dźwiękowy	
Ograniczenie bezpieczeństwa przy 40,5°C	Tak	
Alarm awarii zasilania	Tak, wizualny i dźwiękowy	
Czas nagrzewania od 24°C do 37°C	ok. 15 min.	
Kolor	Biały RAL 9002	
Klasa ochrony	1	
Typ urządzenia	B	
Klasa MDD	IIa	
EN 60601-1: 2006	Tak	
EN 60601: 1-2: 2007	Tak	
EN 80601-2-35: 2010 *	Tak	
	* Szczególne wymogi dotyczące podstawowego bezpieczeństwa urządzeń grzewczych wykorzystujących koce, wkładki i materace przeznaczone do ogrzewania w zastosowaniu medycznym	
Kontrola	Roczna	
Konserwacja prewencyjna	Roczna	

WARDA
Spółka z o.o.

Kontakt: WARDA Sp. z o.o.
ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota
tel.: 607151979, Fax: 52 5610863
e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.warda-warda.pl